

LUNASUS1s

リピートトライアル キャンペーン

キャンペーン期間

2026

2026

3/21 ▶ 9/20

さらにスリムに。

さらにスマートに。

期間限定の特別価格でご提供します。

5801 199965

¥

商品詳細はこちら



LUNASUS1s (ルナス) リピートトライアル キャンペーン ご注文書

以下、必要事項をご記入いただきお申し込みください。

貴医院名	ご購入者氏名	お取引歯科ディーラー名
ご住所 〒		歯科ディーラー営業担当者名
TEL ()	FAX ()	
注文本数	(株) ヨシダ営業所名	(株) ヨシダ営業担当者名


ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。



SLIM NECK MODEL

視野がひろがるスリムネック構造

グリップの断面がトライアングル形状のスリムネックを採用。
広い視野を確保することで切削部位を確認しながら施術できます。

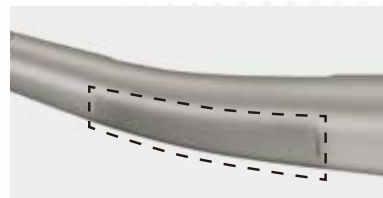

凹加工により、指先にぴったりとフィット

スリムになったネック構造



弊社従来品 (ウィンドロード)





ルナス 1s

臼歯部へのアプローチ

ルナス 1s はアングル角度が 14°のため、開口量が少ない患者さんでも前歯部対合歯に接触することなく、臼歯部へのアプローチが容易に可能です。治療視野を確保しつつ、臼歯部の繊細な処置に最適です。

浅いアングル角度

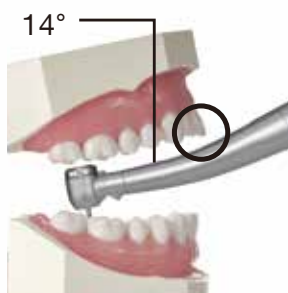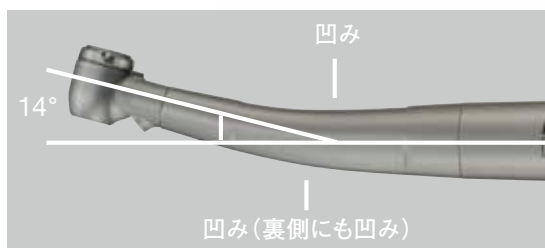


クイックストップ機能


ヘッド部の弁がエアーの ON/OFF により開閉することで回転にブレーキがかかります。惰性回転を抑え、患者さんの頬粘膜や口唇に接触するリスクを軽減します。



クイックSTOP時間
1.59秒

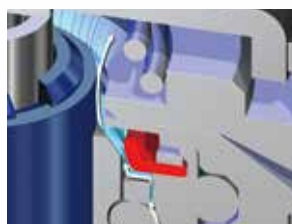

エアー供給時は弁が開きます。

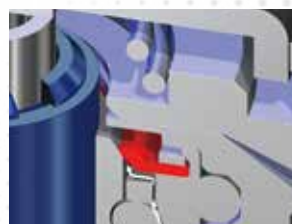

エアー供給が止まると弁がすぐに閉じます。

仕様

無負荷最高回転数	380,000rpm±10%	チャック方式	プッシュチャック
ヘッドサイズ	φ10.9×H13.3	アングル角度	14°
注水	3方注水	重量	49g
推奨使用空気圧力	0.22MPa		